


S&T®
 Vessel Dilators
 血管擴張器



5

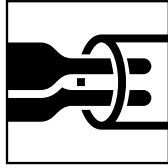

Vessel Dilators
血管擴張器

5.01-07

Basic Informations
 基本情報

5.02

Vessel Dilators, flat handle, angulated 10°
 擴張器、平柄、角度10°

5.03

Vessel Dilators, flat handle, straight
 擴張器、平柄、直

5.04

Vessel Dilators, flat handle, curved / angulated 45°
 擴張器、平柄、曲 / 角度45°

5.05

Vessel Dilators, round handle, straight
 擴張器、丸柄、直


5.06-07



S&T®

Basic informations

基本情報

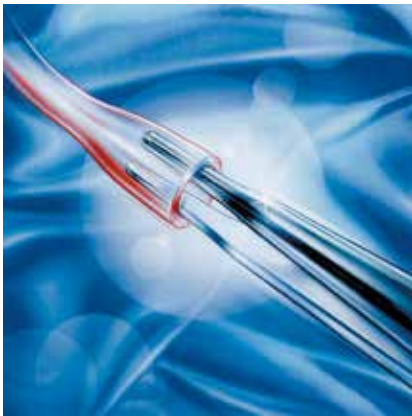

Vessel Dilators

S&T® Vessel dilators feature highly polished parallel tips. They are designed for controlled, interluminal vessel dilation. S&T® offers a wide range of styles to meet your specific requirements.

The special ball point form of the tips ensures that the dilating pressure is evenly distributed over the entire area of the vessel. This dilator form was especially designed for use in microsurgery and is **extremely gentle to small vessels.**

S&T®'s finishes these forceps to the most exacting specifications, ensuring that form, surface and dimensions are exactly within the parameters defined by the developer surgeons.

The mirror-polished surface of the dilator's working area under magnification. **This ensures that unnecessary traumatic damage to the vessel interior is avoided.** The form of these dilators was developed to open the vessel over the entire spasm-affected area in a parallel fashion. The entire dilated area is opened to the same diameter, and the pressure is distributed evenly.

血管拡張器

血管拡張器は、先端が高度に磨かれ、平行になっているのが特徴です。これらは、血管の内径の拡張をコントロールするようにデザインされています。S&T®では、ご要望に合う形状のものを幅広く取り揃えています。

先端が特別なボールペンの形状になっており、拡張圧を確実に血管全域に均等に分布させます。この拡張器の形状は、マイクロサージャリー用に特別にデザインされており、**細い血管に極めて優しく機能します。**

これらの鑷子は最も厳格な規格で仕上げされており、形状、表面、および寸法は開発者の医師によって確定されたパラメータの範囲内であることを保証します。

拡張器の顕微鏡下で作業を行う部分の表面は鏡面仕上げになっています。**これにより、血管内部に対する不必要な外傷性の損傷を確実に回避します。**

これら拡張器の形状は、痙縮の影響がある部分全体に渡って、平行に血管を開くように開発されました。こうして拡張した部分は全体が同じ直径に広がり、圧力が均等にかかります。



Dilators 拡張器	Flat handle, angulated 10° 平柄、角度10°
------------------------	---

length in inch 全長	width handle 柄の中	Ø-Tip / length 先端の径/長さ	Remarks 備考	Art. Code 製品コード	Art. No. 製品番号
----------------------	---------------------	---------------------------	---------------	--------------------	------------------



D-5a.3 (1:1)

4 1/4" 110 mm	9 mm	0.3 mm / 4 mm	Classic Line クラシックライン	D-5a.3	00124
4 1/4" 110 mm	9 mm	0.3 mm / 4 mm	Classic Line, CRYS&TAL クラシックライン	D-5a.3 TC	00913
4 1/4" 110 mm	9 mm	0.2 mm / 8 mm	Classic Line クラシックライン	D-5a.2	00125
4 1/4" 110 mm	9 mm	0.1 mm / 8 mm	Classic Line, SUPERFINE クラシックライン	D-5a.1	00543

CRYS&TAL

TC = Tungsten carbide tips for better grip.
TC = タングステンカーバイドチップ

SUPERFINE

Delicate tips and blades
スーパーファイン



Dilators 拡張器	Flat handle, straight 平柄、直
------------------------	--------------------------------------

length in inch 全長	width handle 柄の中	Ø-Tip / length 先端の径/長さ	Remarks 備考	Art. Code 製品コード	Art. No. 製品番号
----------------------	---------------------	---------------------------	---------------	--------------------	------------------



JFS-3d.2 (1:1)

5 3/8" 135 mm	7 mm	0.2 mm / 8 mm	Classic Line クラシックライン	JFS-3d.2	00324
------------------	------	---------------	--------------------------	-----------------	-------



JFL-3d.3 (1:1)

5 3/8" 135 mm	9 mm	0.3 mm / 4 mm	Classic Line クラシックライン	JFL-3d.3	00275
5 3/8" 135 mm	9 mm	0.2 mm / 8 mm	Classic Line クラシックライン	JFL-3d.2	00233



JF-3-18d.3 (1:1)

7 1/8" 180 mm	9 mm	0.3 mm / 4 mm	Classic Line クラシックライン	JF-3-18d.3	00593
7 1/8" 180 mm	9 mm	0.2 mm / 8 mm	Classic Line クラシックライン	JF-3-18d.2	00501
7 1/8" 180 mm	9 mm	0.1 mm / 8 mm	Classic Line, SUPERFINE クラシックライン	JF-3-18d.1	00912

CRYS&TAL

TC = Tungsten carbide tips for better grip.
TC = タングステンカーバイドチップ

SUPERFINE

Delicate tips and blades
スーパーファイン



Dilators 拡張器	Flat handle, curved / angulated 45° 平柄、曲 / 角度45°
------------------------	---

length in inch 全長	width handle 柄の中	Ø-Tip / length 先端の径 / 長さ	Remarks 備考	Art. Code 製品コード	Art. No. 製品番号
----------------------	---------------------	-----------------------------	---------------	--------------------	------------------



JFCL-3d.2 (1:1)

5 3/8" 135 mm	9 mm	0.2 mm / 8 mm	Classic Line, curved クラシックライン、曲	JFCL-3d.2	00907
7 1/8" 180 mm	9 mm	0.1 mm / 8 mm	Classic Line, curved, SUPERFINE クラシックライン、曲	JFCL-3-18d.1	00932
7 1/8" 180 mm	9 mm	0.2 mm / 8 mm	Classic Line, curved クラシックライン、曲	JFCL-3-18d.2	00911



JFAL-3d.3 (1:1)

5 3/8" 135 mm	9 mm	0.3 mm / 4 mm	Classic Line, angulated 45° クラシックライン、角度45°	JFAL-3d.3	00276
------------------	------	---------------	---	------------------	-------



JFAL-3-18d.2 (1:1)

7 1/8" 180 mm	9 mm	0.2 mm / 4 mm	Classic Line, angulated 45° クラシックライン、角度45°	JFAL-3-18d.2	00910
------------------	------	---------------	---	---------------------	-------

CRY&TAL

TC = Tungsten carbide tips for better grip.
TC = タングステンカーバイドチップ

SUPERFINE

Delicate tips and blades
スーパーファイン



Dilators 拡張器	Round handle, straight 丸柄、直
------------------------	--------------------------------

length in inch 全長	Ø-handle 柄の径	Ø-Tip / length 先端の径/長さ	Remarks 備考	Art. Code 製品コード	Art. No. 製品番号
----------------------	-----------------	---------------------------	---------------	--------------------	------------------



FRS-15 RM-8d.3 (1:1)

6" 150 mm	8 mm	0.3 mm / 4 mm	Balanced Line, Plateau バランスライン、プラトー	FRS-15 RM-8d.3	00590
6" 150 mm	8 mm	0.1 mm / 4 mm	Balanced Line, Plateau, SUPERFINE バランスライン、プラトー	FRS-15 RM-8d.1	00577



FRS-18 RM-8d.3 (1:1)

7 1/8" 180 mm	8 mm	0.3 mm / 4 mm	Balanced Line, Plateau バランスライン、プラトー	FRS-18 RM-8d.3	00594
7 1/8" 180 mm	8 mm	0.2 mm / 4 mm	Balanced Line, Plateau バランスライン、プラトー	FRS-18 RM-8d.2	00941
7 1/8" 180 mm	8 mm	0.1 mm / 4 mm	Balanced Line, Plateau, SUPERFINE バランスライン、プラトー	FRS-18 RM-8d.1	00588

CRYS&TAL

TC = Tungsten carbide tips for better grip.
TC = タングステンカーバイドチップ

SUPERFINE

Delicate tips and blades
スーパーファイン



Dilators 拡張器	Round handle, curved 丸柄、曲
------------------------	-------------------------------------

length in inch 全長	Ø-handle 柄の径	Ø-Tip / length 先端の径/長さ	Remarks 備考	Art. Code 製品コード	Art. No. 製品番号
----------------------	-----------------	---------------------------	---------------	--------------------	------------------



FRC-15 RM-8d.2 (1:1)

6" 150 mm	8 mm	0.2 mm	Balanced Line, SUPERFINE バランスライン	FRC-15 RM-8d.2	00919
7 1/8" 180 mm	8 mm	0.2 mm	Balanced Line, SUPERFINE バランスライン	FRC-18 RM-8d.2	00918

CRYSTAL

TC = Tungsten carbide tips for better grip.
TC = タングステンカーバイドチップ

SUPERFINE

Delicate tips and blades
スーパーファイン



S&T®

Notes

ノート

